


Using the AC power adapter

You may also operate this monitor using an AC adapter. Use only the included AC adapter to avoid damaging the unit.

- a) Ensure that the AC adapter and cable are not damaged.
- b) Plug the adapter cable into the AC adapter port on the right side of monitor.
- c) Plug the AC adapter into a 110 V power socket (U.S. or Canada).
- d) Test that power is available by switching the screen lock located on the right side of the monitor off and on. The screen display will be visible after pressing START/STOP if the power is available.

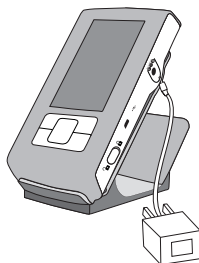


Note:

- No power is taken from the batteries while the AC adapter is connected to the instrument.
- If the power is interrupted during a measurement (e.g., by removal of the adapter from the wall socket), the instrument must be reset by removing the plug from the instrument.

Utilización del adaptador de corriente alterna (AC)

Usted también puede utilizar este monitor con un adaptador de corriente alterna. Para evitar daños a la unidad, utilice únicamente el adaptador incluido.

- a) Asegúrese que tanto el cable como el adaptador no se encuentren dañados.
- b) Conecte el cable del adaptador al portal AC en el lado derecho de la unidad.
- c) Enchufe el adaptador AC a una toma de 110 V de potencia (US o Canadá).
- d) Para probar de que la corriente está disponible, deslice el botón de activación de posición bloqueado a desbloqueado. La pantalla será visible después de pulsar el botón de Encendido/Apagado si la corriente está disponible.

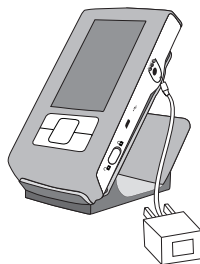

Nota:

- Las baterías no se consumen cuando un adaptador está conectado a la unidad.
- Si la alimentación se interrumpe durante una medición (ej., por eliminación del adaptador de la toma pared), el instrumento debe ser desactivado por la eliminación de la clavija del instrumento.