

**CARRELLO EXCEL
EXCEL TROLLEY
CHARIOT EXCEL
CARRO EXCEL
CARRINHO EXCEL
WAGEN "EXCEL"
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ EXCEL**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF 27440 - 27441



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



INTRODUCTION

In accord with Regulation (EU) 2017/745, this product is part of the CLASS I MEDICAL DEVICES. You should carefully read this manual before using this medical device.

DESCRIPTION

This article is a trolley made of painted steel with 3 or 4 fixed shelves. It is a service trolley for hospital use. The Excel is a practical trolley suitable to support and transport small electromedical instruments.

COMPONENTS


- N.3 Shelves cod.27440
- N.4 Shelves cod.27441
- N.2 Legs

Assembly material:

- N. 4 wheels



- 12 screws TTBE 8X25 cod.27440
- 16 screws TTBE 8x25 cod.27441
- 12 washers 8X16 cod.27440
- 16 washers 8X16 cod.27441
- 12 screws TT 8X16 cod.27440
- 16 screws TT 8X16 FE cod.27441
- N.2 ALLEN KEYS

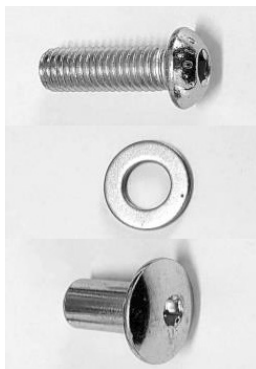


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Begin the assembly phase by setting up a stable horizontal work plan.

Screw the wheels to the base of both legs.

Start to fix the shelves to the structure and take the connecting screws.

Connecting screws	Insert screw and washer INSIDE the shelf.	Insert the TT screw from the OUTSIDE of the structure.
		

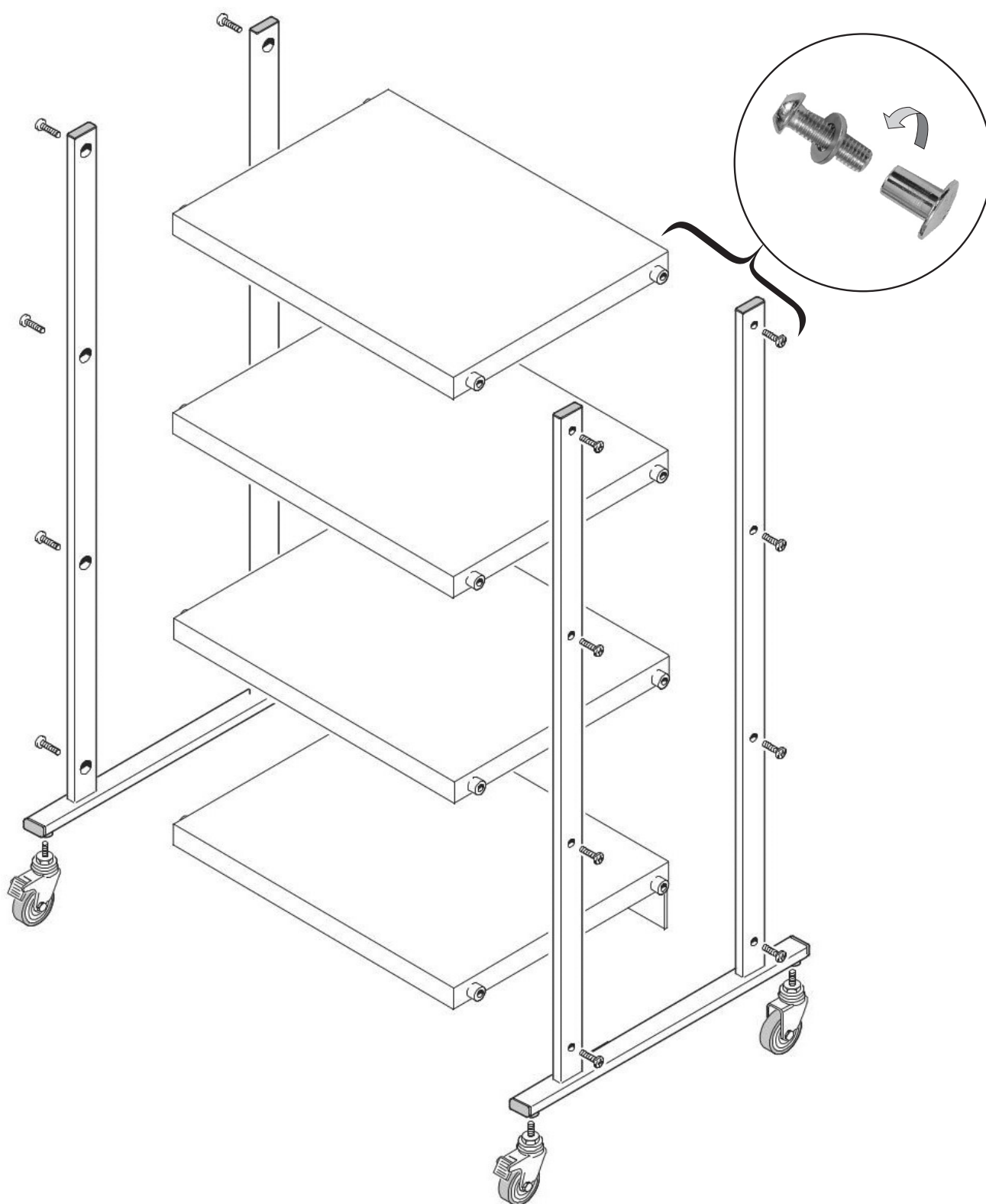

TECHNICAL DATA

Measurement	Trolley 3 shelves: 66x68x h 81 cm Trolley 4 shelves: 66x68x h 111 cm Shelf: 60 x 45 x h 2,5 cm Box: 96,5 x 18,5 x h 74 cm
Weight	Trolley 3 shelves: 27 kg (28,8 kg with box) Trolley 4 shelves: 35,5 kg (37,3 kg with box)
Max capacity	80 kg

WARNINGS!

- Check the locking nuts are tightened.
- Observe the maximum flow rates indicated in the data sheets.
- Avoid direct contact with open wounds.
- Not for use in open environments.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Use only original spare parts.
- Periodically check all fixing points.
- To preserve at best, it is recommended to avoid prolonged exposure to sunlight, to contact and deposit in saline and very humid environments.
- Wash the stainless steel surfaces with soapy water and use appropriate disinfectants.
- Rinse with a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not spill on the surface cleaners containing chlorine or ammonia, fatty and oily substances.
- Do not use cleaning utensils containing iron. If necessary disinfection only use suitable non-corrosive products.

SYMBOLS

	Keep in a cool, dry place	REF	Product code		Consult instructions for use
	Keep away from sunlight	LOT	Lot number		Manufacturer
CE	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Caution: read instructions (warnings) carefully	MD	Medical Device
	Date of manufacture				

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

